

Все для эндохирургии
Производство, продажа, сервис



Гистероскопия

8 800 700 87 03
бесплатный звонок по России
eleps.ru

Гистерокомплекс



Гистерорезектоскопический комплекс «Элепс» — полноценная замена импортного оборудования на отечественное. В зависимости от комплектации соответствующим набором инструментов (подробный перечень на eleps.ru) позволяет осуществлять оперативные вмешательства в следующих областях:

- абдоминальная хирургия
- гистерорезектоскопия
- лапароскопическая гинекология

Оптика **ELEPS**

- Гистероскоп Ø 4 мм: 0° и 30° арт. H402718-AC-S и арт. 402718A-AC-S
- Гистероскоп Ø 2,9 мм: 0°, 30° и 70° арт. H292712, арт. H292712A и арт. 402718C
- Кабель осветительный эндоскопический КОЭ-30-180 арт. КОЭ-30-180

Оборудование **ELEPS**

- Видеокамера эндоскопическая ЭБК-003(081) «ЭлеПС» (Full HD) арт. EVK-003(81)
- Осветитель эндоскопический ELEPS по ТУ 9444-037-12966357-2015 арт. OSV-03
- Аспиратор-иригатор эндоскопический АИЭ-15/15-«ЭлеПС» арт. AI-250-02
- Инсуффлятор электронный эндоскопический ИЭЭ-1/30-«ЭлеПС» (40 литров) арт. I-250-40AU
- Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-300 «ЭлеПС» (многофункциональный с СПРЕЙ функцией) арт. AE-300-02
- Гистеропампа

ООО «НПФ "ЭлеПС"
Казань, Дементьева, 28
т. (843) 203-58-38
ф. (843) 570-81-46
info@eleps.ru

8 800 700 87 03
бесплатный звонок по России
eleps.ru



Неавтоклавируемые эндоскопы

Рабочая длина, мм	Диаметр, мм	Угол зрения, град.	Артикул
300	2,9	0	H292712
300	2,9	30	H292712A
300	4	0	H402718
300	4	30	H402718A
300	4	70	H402718C



Автоклавируемые эндоскопы (сапфировое стекло)

Рабочая длина, мм	Диаметр, мм	Угол зрения, град.	Артикул
300	2,9	0	H292712-AC-S
300	2,9	30	H292712A-AC-S
300	4	0	H402718-AC-S
300	4	30	H402718A-AC-S



Светодиодные (LED) эндоскопы

Рабочая длина, мм	Диаметр, мм	Угол зрения, град.	Артикул
300	2,9	0	H292712-L
300	2,9	30	H292712A-L
300	4	0	H402718-L
300	4	30	H402718A-L
300	4	70	H402718C-L



Тубусы *

Наименование	Диаметр, мм	Артикул
Тубус с крапом для операционной гистероскопии опт. 4,0мм	7,7	HT-02401*1
Тубус с крапом для диагностической гистероскопии опт. 4,0мм	5,5	HT-01401*1
Тубус с крапом для операционной гистероскопии опт. 2,9мм	5,7	HT-02291*1
Тубус с крапом для диагностической гистероскопии опт. 2,9мм	4,0	HT-01291*1

* Полный перечень инструментов и оборудования на сайте eleps.ru

- Качество и надежность, проверенные годами практики
- Расширенная гарантия (однократная замена / ремонт при случайном повреждении)
- Оперативная диагностика и ремонт от производителя
- Обмен старых оптических трубок на новые со скидками до 50%

Портативная видеокамера ЭВК-002(43)

Легкая, компактная, с новейшей технологией CCD

EVK-002(43)



в два раза более высокая чувствительность по сравнению с обычными ПЗС-камерами
габариты блока камеры всего 120х120х30 мм

10-битный цифровой процессор обработки изображений

сверхчувствительный CCD (ПЗС) сенсор не требует мощного источника света
отличная цветопередача
доступная цена

Full HD видеокамера ЭВК-003(81)

Благодаря разрешению 1920х1080 пикселей и цифровой обработке Full HD обеспечивает чистое и четкое изображение

EVK-003(81)



разрешающая способность по горизонтали [HDMI] 900 ТВ-линий
4х кратный цифровой ZOOM и функция «СТОП-кадры»
4 набора настроек для разных пользователей

возможность зеркального отображения, поворота и полного оборачивания
2 программируемые кнопки на камерной головке

Видеокамера эндоскопическая ЭВК – 001(63)

EVK-001(63)



видеокамера оснащена "электронной диафрагмой", позволяющей отслеживать изменение освещенности и стабилизировать яркость воспроизводимого на экране монитора изображения

повышенная четкость, улучшенная цветопередача

легкая, удобная камерная головка имеет три кнопки с возможностью настройки двух функций на каждую

положительные отзывы от совместной работы со светодиодным осветителем «ЭЛЕПС»

Видеокамера эндоскопическая ЭВК-004(65)

со встроенным источником питания для LED-осветителей и LED-эндоскопов

EVK-004(65)



отсутствует необходимость в обычных осветителях

легкая, удобная камерная головка имеет три кнопки с возможностью настройки двух функций на каждую

в комплекте источник света СД-15 для эндоскопов

набор независимых сохраняемых пользовательских настроек

Источники питания для LED эндоскопов

Эндовидеокамера ЭВК-004 (65)

встроенный источник питания
работает независимо от
видеокамеры



Стационарный источник питания БП-02

встроенный аккумуляторный
аварийный источник питания
работающий не менее
2-х часов



Компактный переносной источник питания БП-01

возможность работы в полевых
условиях (не менее 60 минут от
2-х батареек типа AA)



Защита от чрезмерного
перегрева эндоскопа

Отсутствие
необходимости в
осветителях

Недорогое решение для
диагностических и
оперативных процедур

ООО "НПФ "ЭлеПС"
Казань, Дементьева, 28
т. (843) 203-58-38
ф. (843) 570-81-46
info@eleps.ru

Осветитель ксеноновый (300 Вт)

Разработан специально для работы
с Full HD эндоскоической камерой

OSV-01



высокий уровень освещенности
операционного поля

ресурс лампы не менее 500 часов

спектр излучения близкий к
естественному солнечному
спектру

Светодиодный осветитель CD24

OSV-03



Светодиодный осветитель

Освещенность операционного
поля

Срок службы лампы
не менее 30 000 ч

Мощность потребления 150 ВА

Цена

Защита от ослепления при
отсоединении световодного кабеля
Интеллектуальная регулировка
уровня освещенности

=

>

<

<

Ксеноновый осветитель

Освещенность операционного
поля

Срок службы лампы
не более 1000 ч

Мощность потребления 350 ВА

Цена

+

8 800 700 87 03

бесплатный звонок по России

eleps.ru

Аппараты электрохирургические высокочастотные

AE-300-02

300 Вт



режим спрей-коагуляции



режим фульграции



Вид воздействия	Обозначение режима	Режим работы	Макс. мощность (Вт)
Моноплярное резание		Низковольтное резание (Cut Low)	300
		Чистое резание (Cut Pure)	300
		Смешанное резание (Blend)	200
Моноплярная коагуляция		Контактная коагуляция (Low / Desiccate)	120
		Фульгурация (Medium / Fulgurate)	120
		Спрей коагуляция (High / Spray)	120
Моноплярная смесь	1	Резание — 75 % Коагуляция — 25 %	220
	2	Резание — 50 % Коагуляция — 50 %	180
	3	Резание — 25 % Коагуляция — 75 %	140
Биполярная коагуляция	1	Макро режим (Macro bipolar)	90
	2	Стандартный режим (Medium / Standart)	90
	3	Прецизионный режим (Low / Precise)	90

ООО "НПФ "ЭлеПС"
Казань, Деметьева, 2В
т. (843) 203-58-38
ф. (843) 570-81-46
info@eleps.ru

Полноценное импортозамещение
Уникальное соотношение цены и качества
Сервис "Гарантия бесперебойной работы"



AE- 200-04R

120 Вт



2,64 МГц (радиоволновой)



Использование радиочастоты **2,64** МГц облегчает,
улучшает и ускоряет хирургические процедуры.

минимальные болевые ощущения или их полное отсутствие

отсутствие кровотечения и минимальное образование рубцов

гладкий быстро заживающий разрез с минимальным термическим поражением краев

исключает ожоги благодаря применению радиочастоты.

8 800 700 87 03
бесплатный звонок по России
eleps.ru

Электрохирургический аппарат ЭХВЧ-200 "ЭЛЕПС"

AE-200-02



стабилизация выходной мощности при изменении характеристик рассекаемой и коагулируемой ткани, а также при изменении напряжения питающей сети

встроенная система автотеста контроля работы аппарата

аппарат не создает помех на эндовидеокамеру и телевизионный монитор

датчики нейтрального электрода и низкочастотной утечки

запоминание выбранных режимов и последних настроек мощности

одновременная работа монополярного и биполярного инструмента

управление педалью и с помощью держателя электродов с кнопочным управлением

точный выбор мощности

Аспиратор-ирригатор эндоскопический АИЭ-15/15-"ЭЛЕПС"

AI-250-02



способен работать с любым профильным инструментом

накопительная емкость снабжена системой аварийной сигнализации и отключения

быстрая смена источников физиологического раствора

Инсуффлятор электронный эндоскопический (40 литров)



Встроенный речевой информатор*


I-250-40AU



* Речевое информирование об ошибке в системе.



система форсированной подачи газа до 40 л/мин. при непредвиденной потере давления до достижения заданного уровня

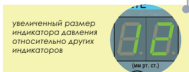

увеличенный размер индикатора давления относительно других индикаторов



двухцветный по типу термометра индикатор входного давления с изменением цвета при нарушении требуемого диапазона входного давления



индикация текущего расхода газа в процентах от установленного

8 800 700 87 03


бесплатный звонок по России

eleps.ru

Гистеропомпа



Встроенный речевой информатор*

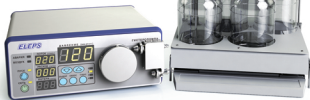

* Речевое информирование об ошибке в системе и о достижении критического уровня дефицита жидкости.


стабильно чистое операционное поле на экране монитора за счет точного соответствия заданного и реального давления в полости матки

равномерная подача раствора обеспечивает **безопасность и хорошую переносимость процедуры** (особенно при офисной гистероскопии)

увеличенный объем банок (2 л) и удобство их замены, обеспечивают более продолжительный срок непрерывной работы

автоматическое **суммирование дефицита** при смене банок

использование **любых видов емкостей** для физ. раствора

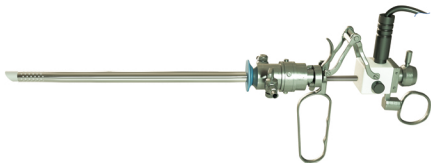

TA-2640

Гистерорезектоскоп активный

TP-2640

Гистерорезектоскоп пассивный



RO-2641

Обтуратор для резектоскопа

8 800 700 87 03

бесплатный звонок по России

eleps.ru

Инструмент гистероскопический

Гистероскоп диагностический




НТ-01291*1

Тубус с краном Ø 4,0 мм для диагностической гистероскопии оптикой 2,9 мм

НТ-01401*1

Тубус с краном Ø 5,5 мм для диагностической гистероскопии оптикой 4 мм

Гистероскоп операционный

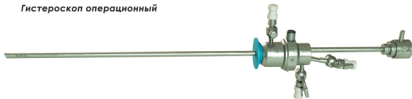

НТ-02291*1

Гистероскоп операционный под оптику 2,9 мм

НТ-02401*1

Гистероскоп операционный под оптику 4 мм

Инструмент полужесткий

		
FZ-01406*2	Зажим для захвата	
FF-01406*2	Щипцы биопсийные	
FS-01406*2	Ножницы односторонние	

Электроды

		
Электрод (нож)		
Электрод (конус)		
Электрод (шарик 5 мм)		
Электрод (шарик 3 мм)		
Электрод (ролик 5 мм)		
Электрод (ролик 3 мм)		
Электрод (ролик с шипами 5 мм)		
Электрод (ролик с шипами 3 мм)		
Электрод (петля прямая)		
Электрод (петля угловая 30 гр)		
Электрод (петля угловая 90 гр)		
Электрод (вапоризатор 5 мм)		
Электрод (вапоризатор 3 мм)		

Современное стерилизующее и дезинфицирующее средство для эндоскопов, эндоскопических инструментов и оборудования

В связи с частыми ошибками при обработке оптических трубок для эндоскопических манипуляций, приводящими к выходу их из строя, а также вопросами, связанными с обработкой оптики, нами разработано специальное средство для стерилизации и дезинфекции оптических трубок, инструментов и оборудования для эндоскопии.

Средство имеет хорошие моющие и дезодорирующие свойства, не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов. Средство сохраняет свои свойства после заморозания и дальнейшего оттаивания. Рабочие растворы негорючи, пожаро- и взрывобезопасны.

Резком дезинфекцию ручным способом

Виды изделий	Режим обработки		Способ обработки
	Концентрация рабочего раствора по параметру (%)	Дозирование (мм)	
Экспозиция материал в ванночке	0,25 0,5 0,8	60 30 15	Подручные
Используемые для экспозиции	0,25 0,5 0,8	45 30 15	

Риск деинфекции, совмещенный с предстерилизационной очисткой
жестких и гибких эндоскопов

Этапы обработки изделий	Режим обработки		
	Концентрация рабочего раствора по рецепту (%)	Температура раствора	Экспозиция (мин)
Замачивание при полном погружении в растворе в течение 10 минут	0,25 0,5 1,0	На коже +18°С	60 30 15
Мытье изделий с мылом в чистой воде	В растворе ebbe произойдет замачивание	На коже +18°С	2-3
Ополаскивание проточной быстрой водой	Не нормировано	Не нормировано	8
Ополаскивание проточной дезинфицирующей водой	Не нормировано	Не нормировано	1

Резким ДВУ и стерилизации жесткими и глубоким эндоскопическим

Виды обработки изделий	Режимы обработки		
	Концентрация рабочего раствора по сравнению (%)	Температура раствора	Экспозиция (мин)
Дезинфекция высокого уровня (ДВУ)	3,0 5,0 6,0	На кипяте +18°C	30 15 5
Стерилизация эндоскопов	3,0 5,0 6,0	На кипяте +18°C	60 30 15

