

Все для эндохирургии
Производство, продажа, сервис



Оториноларингология

ООО "НПФ "ЭлеПС"
Казань, Дементьева, 2В
т. (843) 203-58-38
ф. (843) 570-81-46
info@eleps.ru

8 800 700 87 03
бесплатный звонок по России
eleps.ru



Риноскопический комплекс «Элепс» — полноценная замена импортного оборудования на отечественное, которое позволяет проводить все виды базовых риноскопических операций и диагностических процедур.

Оптика **ELEPS**

- LED-риноскоп Ø 2,7 мм: 0° и 30° арт. PH272712-L и арт. PH272712A-L
- Риноскоп Ø 4 мм: 0°, 30° и 70° арт. PH402718, арт. PH402718A и арт. PH402718C
- Кабель осветительный эндоскопический КОЭ-30-180 арт. КОЭ-30-180
- Рукоятка для эндоскопа защитная (для оптики Ø 2,7 мм и Ø 4 мм) арт. ER-01 27 и арт. ER-01 40

Оборудование **ELEPS**

- Видеокамера эндоскопическая ЭВК-004(65) «ЭлеПС», (с источником питания для LED осветителей) арт. EVK-004(65)
- Источник света CD24 «ЭлеПС» арт. CD-24-02
- Съёмный источник света (с оголовьем) арт. CD-24
- Шейвер ротационный ШР-01-«ЭлеПС» с рукояткой РУ.1 (для риноскопии) арт. МД-150
- Аспиратор-ирригатор эндоскопический АИЭ-15/15-«ЭлеПС» арт. AI-250-02
- Компактный блок питания арт. БП-01




Неавтоклавируемые эндоскопы

Рабочая длина, мм	Диаметр, мм	Угол зрения, град.	Артикул
175	2,7	0	PH272712
175	2,7	30	PH272712A
175	4	0	PH402718
175	4	30	PH402718A
175	4	70	PH402718C
175	5	70	L502718C
60	2,7	0	A272712
60	2,7	30	A272712A
60	4	0	A402718
60	4	30	A402718A



Автоклавируемые эндоскопы (сапфировое стекло)

Рабочая длина, мм	Диаметр, мм	Угол зрения, град.	Артикул
175	4	0	PH402718-AC-S
175	4	30	PH402718A-AC-S
60	4	0	A402718-AC-S
60	4	30	A402718A-AC-S

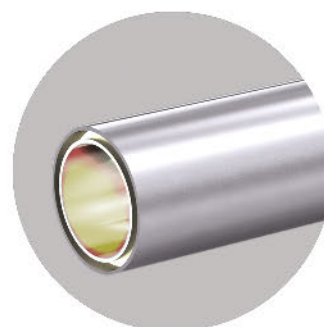

Светодиодные (LED) эндоскопы

Рабочая длина, мм	Диаметр, мм	Угол зрения, град.	Артикул
175	2,7	0	PH272712-L
175	2,7	30	PH272712A-L
175	4	0	PH402718-L
175	4	30	PH402718A-L
175	4	70	PH402718C-L
175	5	70	L502718C-L
60	2,7	0	A272712-L
60	2,7	30	A272712A-L
60	4	0	A402718-L
60	4	30	A402718A-L



- Качество и надежность, проверенные годами практики
- Расширенная гарантия (однократная замена / ремонт при случайном повреждении)
- Оперативная диагностика и ремонт от производителя
- Обмен старых оптических трубок на новые со скидками до 50%

Источники питания для LED эндоскопов

Эндовидеокамера ЭВК-004 (65)

встроенный источник питания
работает независимо от
видеокамеры




Стационарный источник питания БП-02

встроенный аккумуляторный
аварийный источник питания
работающий не менее
2-х часов



Компактный переносной источник питания БП-01

возможность работы в полевых
условиях (не менее 60 минут от 2-х
батареек типа АА)

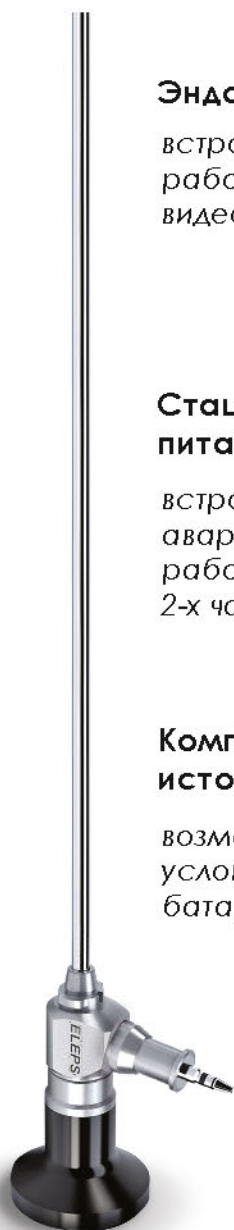

Защита от чрезмерного
перегрева эндоскопа

Отсутствие
необходимости в
осветителях

Недорогое решение для
диагностических и
оперативных процедур

ООО "НПФ "ЭлеПС"
Казань, Дементьева, 2В
т. (843) 203-58-38
ф. (843) 570-81-46
info@eleps.ru



Диагностический комплекс ЭЛЕПС для оториноларингологии позволяет записывать видео и делать фотографии, сохраняя их в папку каждого пациента сразу во время процедуры.


Диагностический комплекс 3 в 1:
видеосистема + источник света + блок архивации.
Используется совместно с LED эндоскопами.



Видеокамера эндоскопическая ЭВК-004(67) "ЭлеПС",
(с источником питания для LED осветителей
и системой архивации данных)

отсутствует
необходимость в
обычных
осветителях

в комплекте источник
света СД-15 для
эндоскопов

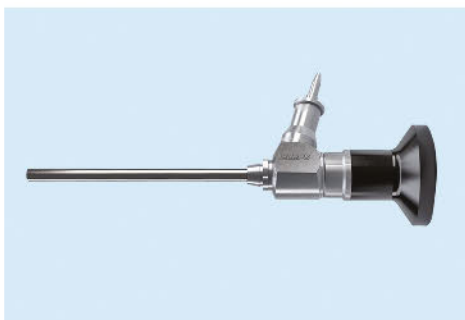

LED эндоскоп ЭЛЕПС со встроенным
светодиодным источником света

не требует внешнего
источника света

уменьшен нагрев в
процессе работы



Видеокамера эндоскопическая ЭВК – 001(63)

EVK-001(63)



видеокамера оснащена "электронной диафрагмой", позволяющей отслеживать изменение освещенности и стабилизировать яркость воспроизводимого на экране монитора изображения

повышенная четкость, улучшенная цветопередача

легкая, удобная камерная головка имеет три кнопки с возможностью настройки двух функций на каждую

положительные отзывы от совместной работы со светодиодным осветителем «ЭЛЕПС»

Видеокамера эндоскопическая ЭВК-004(65)

со встроенным источником питания для LED-осветителей и LED-эндоскопов

EVK-004(65)



отсутствует необходимость в обычных осветителях

легкая, удобная камерная головка имеет три кнопки с возможностью настройки двух функций на каждую

в комплекте источник света СД-15 для эндоскопов

набор независимых сохраняемых пользовательских настроек

Полноценное импортозамещение

Уникальное соотношение цены и качества

Сервис "Гарантия бесперебойной работы"



Портативная видеокамера ЭВК-002(43)

Легкая, компактная, с новейшей технологией CCD

EVK-002(43)



в два раза более высокая чувствительность по сравнению с обычными ПЗС-камерами

габариты блока камеры всего 120x120x30 мм

10-битный цифровой процессор обработки изображений

сверхчувствительный CCD (ПЗС) сенсор не требует мощного источника света

отличная цветопередача

доступная цена

Full HD видеокамера ЭВК-003(81)

Благодаря разрешению 1920x1080 пикселей и цифровой обработке Full HD обеспечивает чистое и четкое изображение

EVK-003(81)



разрешающая способность по горизонтали (HDMI) 900 ТВ-линий

4x кратный цифровой ZOOM и функция «СТОП-кадр»

4 набора настроек для разных пользователей

возможность зеркального отображения, поворота и полного оборачивания

2 программируемые кнопки на камерной головке

8 800 700 87 03

бесплатный звонок по России

eleps.ru

Светодиодный осветитель

полноценный эквивалент
200 Вт ксенонового
осветителя

долговечный источник
света

выгодная цена

CD-24-02



Светодиодный осветитель

Освещенность операционного
поля

Срок службы лампы
не менее 30 000 ч

Мощность потребления 150 ВА

Цена

+

Защита от ослепления при
отсоединении световодного кабеля

+

Интеллектуальная регулировка
уровня освещенности

Ксеноновый осветитель

Освещенность операционного
поля

Срок службы лампы
не более 1000 ч

Мощность потребления 350 ВА

Цена

=

>

<

<

ООО "НПФ "ЭлеПС"
Казань, Дементьева, 2В
т. (843) 203-58-38
ф. (843) 570-81-46
info@eleps.ru

Радиоволновой хирургический аппарат ЭХВЧ-200 "ЭЛЕПС"



использование
радиочастоты 2,64 МГц
облегчает, улучшает и
ускоряет хирургические
процедуры

исключает ожоги благодаря
применению радиочастоты

минимальные болевые
ощущения или их полное
отсутствие

гладкий быстро
заживающий разрез с
минимальным
термическим
поражением краев

отсутствие кровотечения и
минимальное
образование рубцов

Аспиратор-ирригатор эндоскопический АИЭ-15/15-"ЭЛЕПС"



способен работать с
любым профильным
инструментом

накопительная емкость
снабжена системой
аварийной сигнализации
и отключения

быстрая смена
источников
физиологического
раствора

Шейвер ротационный риноскопический

Уникальная отечественная разработка специалистов “Элепс”. Является необходимым компонентом риноскопического комплекса для проведения современных щадящих операций.



плавное управление
вращением инструмента
от педали

стабилизация частоты
вращения независимо от
изменения плотности
ткани

непрерывная эвакуация
крови и тканей для ясности
операционного поля

9 настраиваемых
режимов работы

3 скорости реверсивного
вращения инструмента

память на 9
настраиваемых режимов
вращения инструмента

С рукояткой РУ.1

статический вращающий
момент не менее
160 мН×м

неразъемное подключение
соединительного кабеля
к рукоятке



С рукояткой РО.1

статический вращающий
момент не менее
80 мН×м

подключение рукоятки к блоку
управления производится
кабелем, снабженным
электрическими разъемами
с обеих сторон



Полноценное импортозамещение

Уникальное соотношение цены и качества

Сервис "Гарантия бесперебойной работы"



Новая шейверная рукоятка



Современная легкая и эргономичная рукоятка риношейвера с прямым каналом аспирации. Удобно работать и чистить.

- Не засоряется
- Надежная фиксация и удобная смена насадок



Новая рукоятка

статический вращающий
момент не менее
80 мН×м

неразъемное подключение
соединительного кабеля
к рукоятке

более 20 видов инструмен-
тальных вставок

8 800 700 87 03

бесплатный звонок по России

eleps.ru

Вставки инструментальные риноскопические

Прямые инструментальные вставки (Ø 4,2 мм)

Вставка сепарирующая

Артикул: WN-042R
Диаметр: 4,2 мм
Длина: 120 мм



Вставка режущая

Артикул: LN-042R
Диаметр: 4,2 мм
Длина: 120 мм




Вставка сверлящая

Артикул: RN-042R
Диаметр: 4,2 мм
Длина: 120 мм




Вставка отсекающая

Артикул: KN-042R
Диаметр: 4,2 мм
Длина: 120 мм

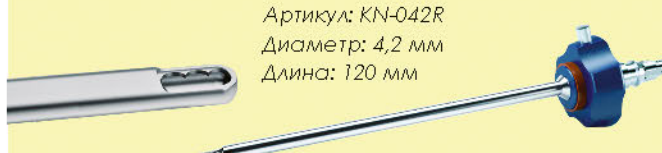

Вставка режущая

Артикул: GN-042R
Диаметр: 4,2 мм
Длина: 120 мм

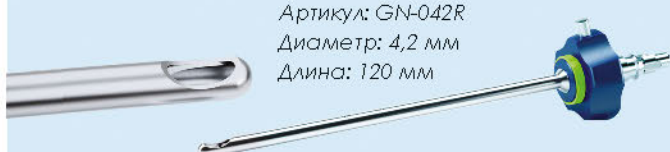

Вставка режущая


Артикул: SN-042R
Диаметр: 4,2 мм
Длина: 120 мм



Прямые инструментальные вставки (Ø 3 мм)


Вставка отсекающая

Артикул: KN-030R
Диаметр: 3 мм
Длина: 120 мм

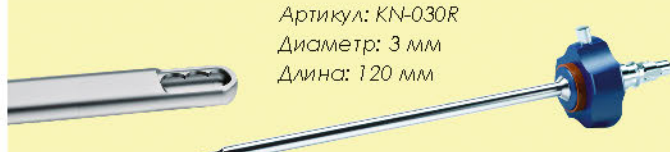

Вставка режущая

Артикул: LN-030R
Диаметр: 3 мм
Длина: 120 мм

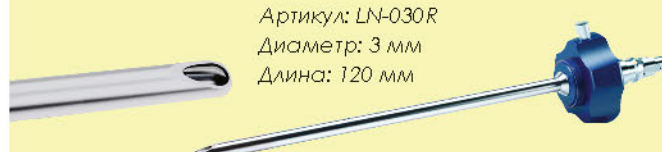

Изогнутые инструментальные вставки (Ø 4,2 мм)

Вставка отсекающая (тыловая)

Артикул: KNB-042R-80
Угол изгиба: 80 гр.
Диаметр: 4,2 мм
Длина: 120 мм



Вставка отсекающая (фронтальная)

Артикул: KNF-042R-80
Угол изгиба: 80 гр.
Диаметр: 4,2 мм
Длина: 120 мм



Полноценное импортозамещение

Уникальное соотношение цены и качества

Сервис "Гарантия бесперебойной работы"



Вставка отсекающая (тыловая)

Артикул: KNB-042R-65
Угол изгиба: 65 гр.
Диаметр: 4,2 мм
Длина: 120 мм

Вставка отсекающая (фронтальная)

Артикул: KNF-042R-65
Угол изгиба: 65 гр.
Диаметр: 4,2 мм
Длина: 120 мм

Вставка отсекающая (тыловая)

Артикул: KNB-042R-35
Угол изгиба: 35 гр.
Диаметр: 4,2 мм
Длина: 120 мм

Вставка отсекающая (фронтальная)

Артикул: KNF-042R-35
Угол изгиба: 35 гр.
Диаметр: 4,2 мм
Длина: 120 мм

Вставка режущая (тыловая)

Артикул: GNB-042R-65
Угол изгиба: 65 гр.
Диаметр: 4,2 мм
Длина: 120 мм

Вставка режущая (фронтальная)

Артикул: GNF-042R-65
Угол изгиба: 65 гр.
Диаметр: 4,2 мм
Длина: 120 мм

Изогнутые инструментальные вставки (Ø 3 мм)

Вставка отсекающая (тыловая)

Артикул: KNB-030R-65
Угол изгиба: 65 гр.
Диаметр: 3 мм
Длина: 120 мм

Вставка отсекающая (фронтальная)

Артикул: KNB-030R-65
Угол изгиба: 65 гр.
Диаметр: 3 мм
Длина: 120 мм

Вставка отсекающая (тыловая)

Артикул: KNB-030R-35
Угол изгиба: 35 гр.
Диаметр: 3 мм
Длина: 120 мм

Вставка отсекающая (фронтальная)

Артикул: KNF-030R-35
Угол изгиба: 35 гр.
Диаметр: 3 мм
Длина: 120 мм

8 800 700 87 03

бесплатный звонок по России

eleps.ru

Инструмент риноскопический

Канюли, стилеты



EK-01051k	Троакар (по Красножону, 5 мм)	
EK-01071k	Троакар (по Красножону, 7 мм)	
EK1-020430-1	Канюля эндоскопическая (бесклапанная, бокового обзора)	
EK1-020400-1	Канюля эндоскопическая (бесклапанная, прямого обзора)	

Инструменты для аспирации-ирригации



EA-01410-1	Инструмент для аспирации и ирригации (одноходовой изогнутый)	
EA-01420-1	Инструмент для аспирации и ирригации (двухходовой изогнутый 4 мм)	

Кюретки



K-0411E	Инструмент для сепарации тканей (кюретка угловая овальная, размер 1,5*8мм)	
K-0412E	Инструмент для сепарации тканей (кюретка угловая овальная, размер 2,4*6,5мм)	
K-0421E	Инструмент для сепарации тканей (кюретка угловая окончатая, размер 2, D5)	
K-0422E	Инструмент для сепарации тканей (кюретка угловая окончатая, размер 2, D4,5)	
K-0431E	Инструмент для сепарации тканей (кюретка угловая округлая, размер 1, D5,5)	
K-0432E	Инструмент для сепарации тканей (кюретка угловая округлая, размер 2, D4,5)	
EE-01400-1	Инструмент для сепарации тканей (элеватор-распаратор)	


Скальпели, иглы



C-0401E	Инструмент для сепарации тканей (серповидный остроконечный скальпель)	
C-0402E	Инструмент для сепарации тканей (серповидный тупоконечный скальпель)	
EN-01	Игла эндоскопическая инъекционная (изогнутая)	

Инструмент риноскопический

Выкусыватели

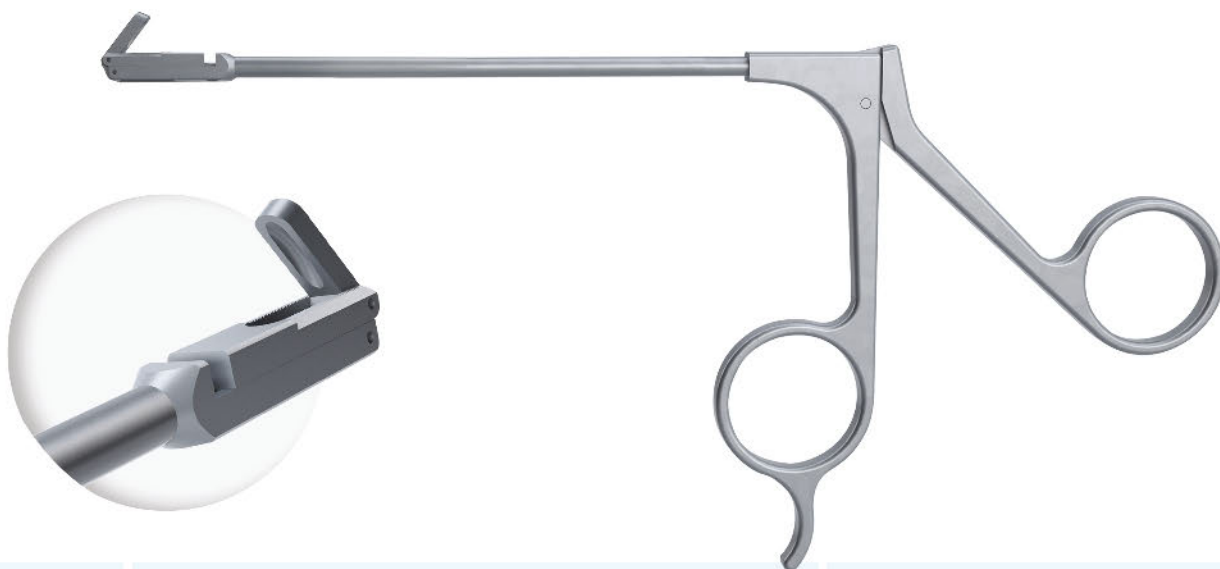


EW-01401-1	Выкусыватель эндоскопический прямой (тип Блэксли № 1)	
EW-01402-1	Выкусыватель эндоскопический прямой (тип Блэксли № 2)	
EW-01445-1	Выкусыватель эндоскопический прямой (тип Блэксли, угловой 45 град.)	
EW-01445-1	Выкусыватель эндоскопический прямой (тип Блэксли, угловой 90 град.)	
EW-02400-1	Выкусыватель эндоскопический обратный прямой	

Ножницы



ES-01400-1	Ножницы эндоскопические с одной подвижной браншей, прямые	
ES-01410-1	Ножницы эндоскопические с одной подвижной браншей (левоизогнутые)	
ES-01420-1	Ножницы эндоскопические с одной подвижной браншей (правоизогнутые)	

Щипцы

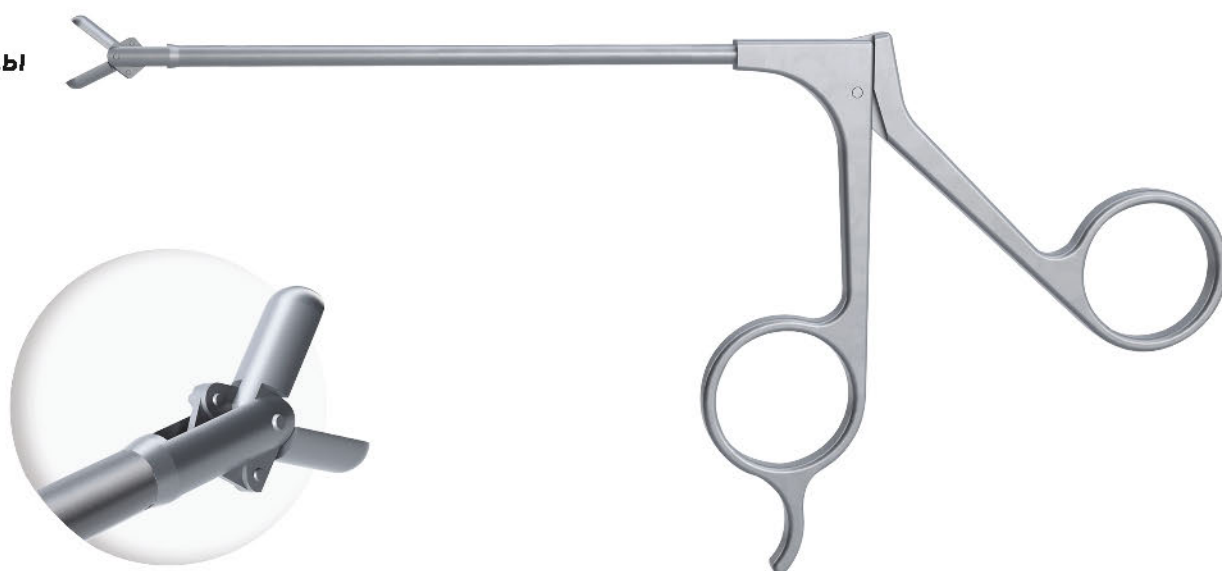

EF-01400-1	Щипцы эндоскопические биопсийные	
EF-03407-2	Щипцы эндоскопические (для вертикальных пазух угловые 70 град. с вертикальным раскрытием бранш)	
EF-03407-1	Щипцы эндоскопические (для вертикальных пазух угловые 70 град. с горизонтальным раскрытием бранш)	
EF-02411-2	Щипцы эндоскопические (для вертикальных пазух угловые 110 град. с вертикальным раскрытием бранш)	
EF-02411-1	Щипцы эндоскопические (для вертикальных пазух угловые 110 град. с горизонтальным раскрытием бранш)	
EF-05400-1	Щипцы эндоскопические (тип Страйкен, прямые)	
EF-04400-1	Щипцы эндоскопические (тип Такахаши, прямые)	
EF-04445-1	Щипцы эндоскопические (тип Такахаши, угловые 45 град.)	

Диагностический и операционный ЛОР-инструмент




Компания “ЭлеПС” предлагает полный комплекс инструментов для диагностики и операций в оториноларингологии:

- зеркала
- шпатели
- зонды
- расширители
- ножницы
- щипцы
- выкусыватели
- кюретки

* Полный перечень ЛОР-инструментов и оборудования на сайте eleps.ru

ООО “НПФ “ЭлеПС”
Казань, Дементьева, 2В
т. (843) 203-58-38
ф. (843) 570-81-46
info@eleps.ru

Комплексное оснащение ЛОР-кабинетов

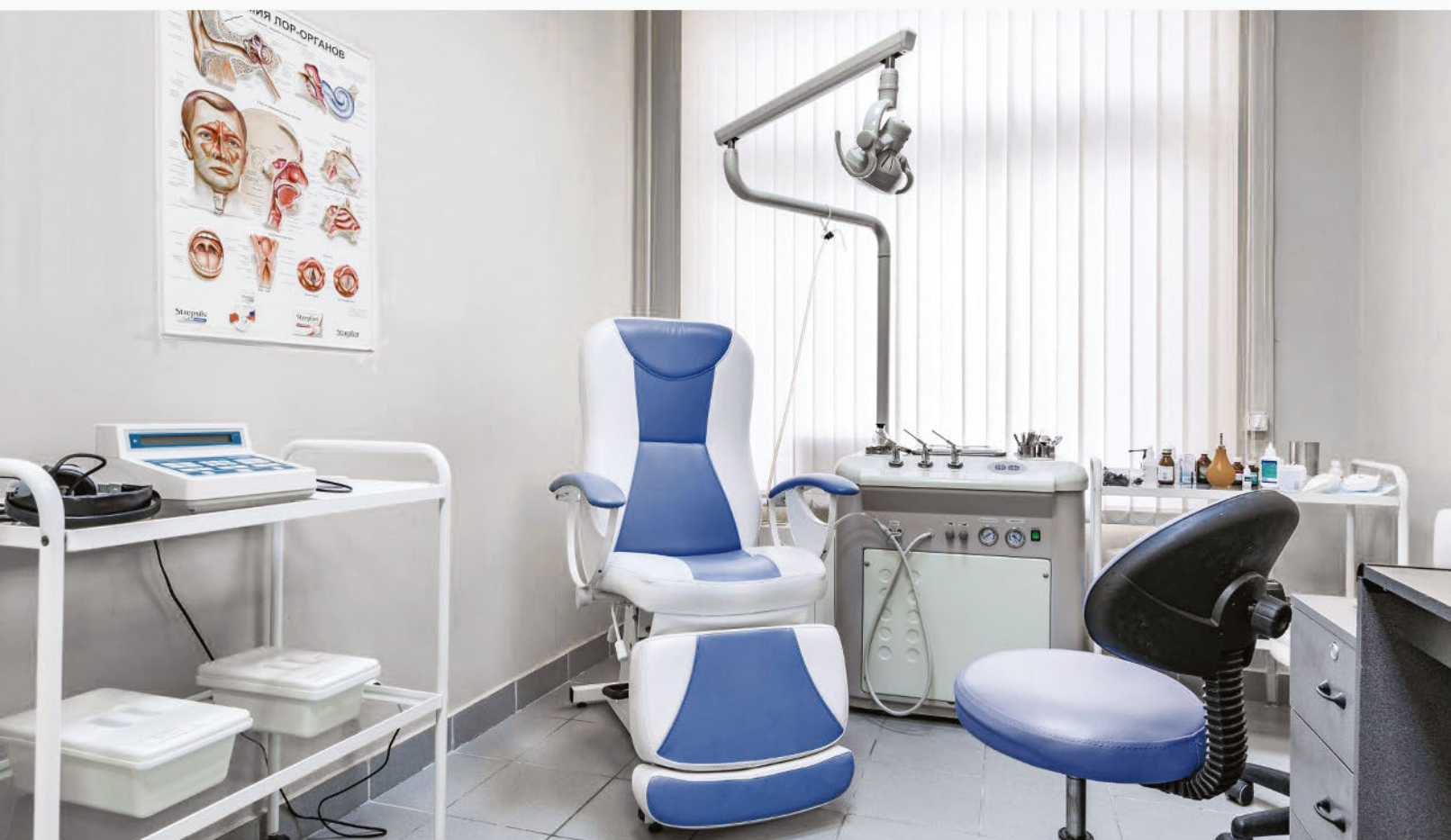

Комплект «Лицензия»

Минимальный набор для получения лицензии на открытие ЛОР-кабинета. Полное соответствие стандартам оснащения Минздрава РФ с учетом ограниченности бюджета на этапе старта бизнеса.

Комплект «Оптимальный»

Расширенный набор мебели, оборудования и инструментов, включающий все необходимое для комфортной работы ЛОР-врача и максимального удобства пациента.

Комплект «Трансфер»

Минимальный комплект для лицензирования ЛОР-кабинета в аренду от производителя.

Приобретение любого комплекта возможно в рамках лизинговой программы.

* Подробную информацию о комплектации и лизинговой программе вы можете получить у вашего куратора.

8 800 700 87 03

бесплатный звонок по России

eleps.ru

Эхосинускоп Sinuscan-201 (Синускан)

Прибор ультразвуковой диагностики Sinuscan-201 является простой и безопасной заменой традиционным методам диагностирования и контроля лечения воспалений верхнечелюстной (гайморовой) и лобной придаточных пазух носа (синуситов).



Быстрая диагностика без предварительной подготовки к процедуре

Безболезненное сканирование

Простота использования

Мобильность аппарата

Безопасность использования как для пациента, так и для врача

Возможность повторного исследования без вреда для здоровья пациента

Возможность применения при диагностировании детей от 3 лет и беременных женщин

Высокая достоверность результатов, подтвержденная научными исследованиями

Наглядность представления информации на LCD дисплее устройства

Возможность сохранения результатов диагностики в памяти устройства

Возможность быстрого вывода результатов исследования на печатающее устройство

Эргономичный дизайн, позволяющий проводить исследование как правой, так и левой рукой

Компьютерный риноманометр РИНОЛАН

Компьютерный риноманометр с базой данных для объективной оценки проходимости носовых ходов.

Исследование выполняется по методике передней активной риноманометрии (ПАР)



Объективная оценка проходимости

Простой и наглядный тест

Сравнение результатов

Выявление патологий

Риноманометрическая компьютерная приставка
Прессотактоспирограф ПТС-14П-01 подключается к ПК
и позволяет проводить следующие обследования:

- определение скорости и давления потока
- построение кривых скорости потока и давления в реальном времени.
- построение петли поток-давление.
- расчет значений скорости и давления в реперных точках.
- измеряемые значения: FIR, FIL, FSUMI, FIRMAX, FILMAX, RIR, RIL, FER, FEL, FSUME, FERMAX, FELMAX, RER, REL
- диапазоны измеряемых параметров: Скорость: +/- 1200 мл/с. Давление: +/- 1000 Па.
- сохранение результатов обследования в архиве.
- сравнение до 4-х обследований и расчет разницы
- распечатка результатов

Аппарат ультразвуковой низкочастотный "ТОНЗИЛЛОР-ММ"

Тонзилор предназначен для консервативного и хирургического лечения заболеваний лор-органов воздействием энергией низкочастотных ультразвуковых колебаний и вакуумом на пораженные биоткани как через жидкие лекарственные препараты, так и контактно.



в 1,5-2 раза увеличивает эффективность консервативного лечения большинства хронических заболеваний

позволяет в 4 раза сократить число операций по удалению небных миндалин с достижением выздоровления у 59% больных с компенсированной и у 21% больных с декомпенсированной формами хронического тонзиллита

единственный метод для лечения больных со сложной соматической патологией, имеющих противопоказания к общему обезболиванию и тонзиллэктомии

в комплекте удобный кейс с мягкой вставкой для хранения и переноски прибора и аксессуаров

ЛОР-установка MOBILE NET-1100

Мобильная, многофункциональная ЛОР-установка с удобной ручкой.

- система аспирации
- распыляющая система
- устройство для нагрева инструментария
- 3-х литровая емкость для отсасывающей системы
- 2 емкости для отходов
- 2 емкости для лекарственных форм (медицинское стекло)
- 2 встроенные емкости для стерилизации эндоскопов
- вращающийся столик для инструментов
- возможность инсталляции большого количества дополнительного оборудования и аксессуаров



ЛОР-установка MULTI NET-600A

Компактная, многофункциональная ЛОР-установка для совместной работы ЛОР врача и ассистента.

- 3 прямых распылителя
- 2 отсасывающих устройства
- 2 контейнера для перевязочного материала
- 3 емкости для отходов
- 4 емкости для лекарственных форм
- 2 емкости для инструментария
- устройство нагрева зеркал
- светодиодный осветитель типа "ручка"
- возможность инсталляции большого количества дополнительного оборудования и аксессуаров



Современное стерилизующее и дезинфицирующее средство для эндоскопов, эндоскопических инструментов и оборудования

В связи с частыми ошибками при обработке оптических трубок для эндоскопических манипуляций, приводящими к выходу их из строя, а также вопросами, связанными с обработкой оптики, нами разработано специальное средство для стерилизации и дезинфекции оптических трубок, инструментов и оборудования для эндоскопии.

Средство имеет хорошие моющие и дезодорирующие свойства, не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов. Средство сохраняет свои свойства после заморозания и дальнейшего оттаивания. Рабочие растворы негорючи, пожаро- и взрывобезопасны.

Режим дезинфекции ручным способом

Виды изделий	Режим обработки		Способ обработки
	Концентрация рабочего раствора по препарату (%)	Экспозиция (мин)	
Эндоскопы жесткие и гибкие	0,25	60	Погружение
	0,5	30	
	1,0	15	
Инструменты для эндоскопов	0,25	45	
	0,5	20	
	1,0	10	

Режим дезинфекции, совмещенный с предстерилизационной очисткой жестких и гибких эндоскопов

Этапы обработки изделий	Режим обработки		
	Концентрация рабочего раствора по препарату (%)	Температура раствора	Экспозиция (мин)
Замачивание при полном погружении и заполнении каналов	0,25 0,5 1,0	Не ниже +18°С	60 30 15
Мойка изделий с мойкой и чистой водой	В растворе где производилось замачивание	Не ниже +18°С	2-3
Ополаскивание проточной питьевой водой	Не нормировано	Не нормировано	5
Ополаскивание проточной дистиллированной водой	Не нормировано	Не нормировано	1

Режим ДВУ и стерилизации жестких и гибких эндоскопов

Виды обработки изделий	Режим обработки		
	Концентрация рабочего раствора по препарату (%)	Температура раствора	Экспозиция (мин)
Дезинфекция высокого уровня (ДВУ)	3,0	Не ниже +18°С	30
	4,0		15
	6,0		5
Стерилизация эндоскопа	3,0	Не ниже +18°С	60
	4,0		30
	6,0		15
	8,0		5

* Полные рекомендации по применению средства "ЭНДОДЕЗ" содержатся в инструкции по применению для персонала ЛПУ и пр. учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

