


Все для эндохирургии  
Производство, продажа, сервис

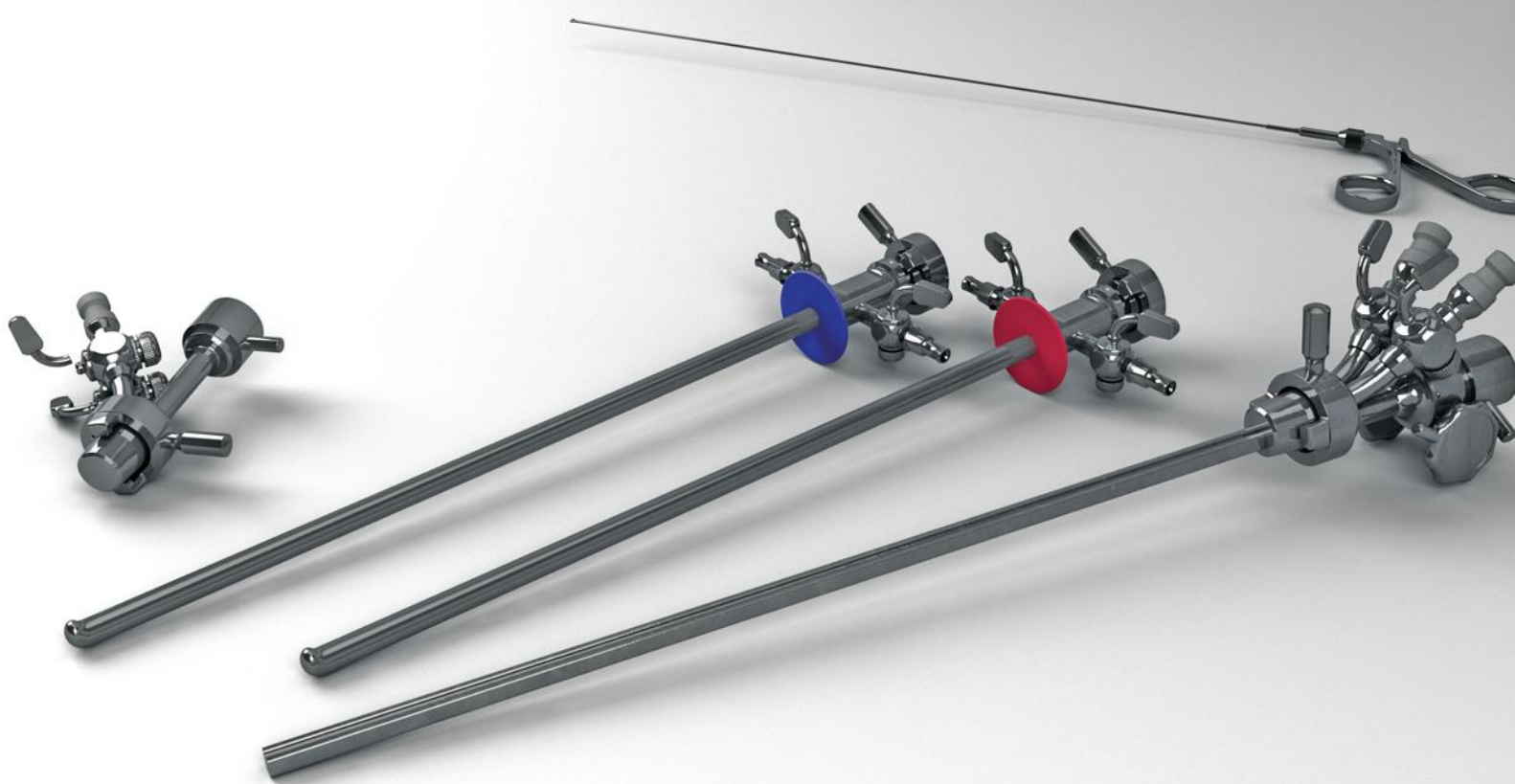

## Урология

ООО "НПФ "ЭлеПС"  
Казань, Деметьева, 2В  
т. (843)203-58-38  
ф.(843)570-81-46  
info@eleps.ru

**8 800 700 87 03**  
бесплатный звонок по России  
**eleps.ru**

# Комплекс для урологии



Урологический комплекс «Элепс» — полноценная замена импортного оборудования на отечественное. В зависимости от комплектации соответствующим набором инструментов (подробный перечень на [eleps.ru](http://eleps.ru)) позволяет осуществлять рутинные оперативные вмешательства в следующих областях:

- абдоминальная хирургия
- цисторезектоскопия

## Оптика **ELEPS**


- Лапароскоп Ø10 мм: 0° и 30° арт. 101030-AC-S и арт. 101030A-AC-S
- Лапароскоп Ø 5 мм: 30° арт. 501018A-AC-S
- Кабель осветительный эндоскопический КОЭ-50-240 арт. КОЭ-50-240
- Гистероскоп Ø 4 мм: 0° и 30° арт. H402718-AC-S и арт. 402718A-AC-S
- Гистероскоп Ø 2,9 мм: 0°, 30° и 70° арт. H292712, арт. H292712A и арт. 402718C
- Кабель осветительный эндоскопический КОЭ-30-180 арт. КОЭ-30-180

## Оборудование **ELEPS**

- Видеокамера эндоскопическая ЭВК-003(081) «ЭлеПС», (Full HD) арт. EVK-003(81)
- Осветитель эндоскопический ELEPS по ТУ 9444-037-12966357-2015 арт. OSV-03
- Аспиратор-иригатор эндоскопический АИЭ-15/15-«ЭлеПС» арт. AI-250-02
- Инсуффлятор электронный эндоскопический ИЭЭ-1/30-«ЭлеПС» (40 литров) арт. I-250-40AU
- Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-300 «ЭлеПС», (многофункциональный с СПРЕЙ функцией) арт. AE- 300-02
- Урологическая помпа

ООО "НПФ "ЭлеПС"  
Казань, Дементьева, 2В  
т. (843)203-58-38  
ф.(843)570-81-46  
[info@eleps.ru](mailto:info@eleps.ru)

**8 800 700 87 03**  
бесплатный звонок по России  
**eleps.ru**

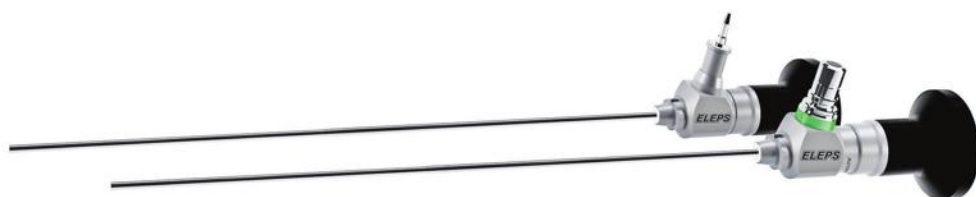


## Неавтоклавируемые эндоскопы

| Рабочая длина, мм | Диаметр, мм | Угол зрения, град. | Артикул   |
|-------------------|-------------|--------------------|-----------|
| 300               | 2,9         | 0                  | H292712   |
| 300               | 2,9         | 30                 | H292712A  |
| 300               | 4           | 0                  | H402718   |
| 300               | 4           | 30                 | H402718A  |
| 300               | 4           | 70                 | H402718C  |
| 300               | 5           | 30                 | 501018A-L |
| 320               | 10          | 0                  | 101030-L  |
| 320               | 10          | 30                 | 101030A-L |



## Автоклавируемые эндоскопы (сапфировое стекло)

| Рабочая длина, мм | Диаметр, мм | Угол зрения, град. | Артикул       |
|-------------------|-------------|--------------------|---------------|
| 300               | 2,9         | 0                  | H292712-AC-S  |
| 300               | 2,9         | 30                 | H292712A-AC-S |
| 300               | 4           | 0                  | H402718-AC-S  |
| 300               | 4           | 30                 | H402718A-AC-S |
| 300               | 5           | 30                 | 501018A-AC-S  |
| 320               | 10          | 0                  | 101030-AC-S   |
| 320               | 10          | 30                 | 101030A-AC-S  |

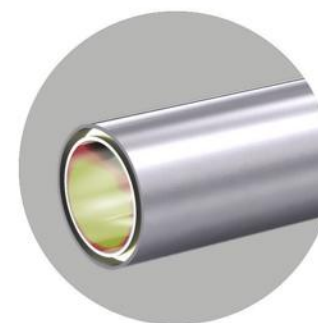

## Светодиодные (LED) эндоскопы

| Рабочая длина, мм | Диаметр, мм | Угол зрения, град. | Артикул    |
|-------------------|-------------|--------------------|------------|
| 300               | 2,9         | 0                  | H292712-L  |
| 300               | 2,9         | 30                 | H292712A-L |
| 300               | 4           | 0                  | H402718-L  |
| 300               | 4           | 30                 | H402718A-L |
| 300               | 4           | 70                 | H402718C-L |



\* Полный перечень инструментов и оборудования на сайте [eleps.ru](http://eleps.ru)

- Качество и надежность, проверенные годами практики
- Расширенная гарантия (однократная замена / ремонт при случайном повреждении)
- Оперативная диагностика и ремонт от производителя
- Обмен старых оптических трубок на новые со скидками до 50%

## Видеокамера эндоскопическая ЭВК – 001(63)

*EVK-001(63)*



видеокамера оснащена "электронной диафрагмой", позволяющей отслеживать изменение освещенности и стабилизировать яркость воспроизводимого на экране монитора изображения

повышенная четкость, улучшенная цветопередача

легкая, удобная камерная головка имеет три кнопки с возможностью настройки двух функций на каждую

положительные отзывы от совместной работы со светодиодным осветителем «ЭЛЕПС»

## Видеокамера эндоскопическая ЭВК-004(65)

**со встроенным источником питания для LED-осветителей и LED-эндоскопов**

*EVK-004(65)*



отсутствует необходимость в обычных осветителях

легкая, удобная камерная головка имеет три кнопки с возможностью настройки двух функций на каждую

в комплекте съемный светодиодный источник света СД-15

набор независимых сохраняемых пользовательских настроек

Полноценное импортозамещение

Уникальное соотношение цены и качества

Сервис "Гарантия бесперебойной работы"



### Full HD видеокамера ЭВК-003(81)

Благодаря разрешению 1920x1080 пикселей и цифровой обработке Full HD обеспечивает чистое и четкое изображение

EVK-003(81)



разрешающая способность по горизонтали (HDMI) 900 ТВ-линий

4x кратный цифровой ZOOM и функция «СТОП-кадр»

4 набора настроек для разных пользователей

возможность центровки изображения на мониторе

2 программируемые кнопки на камерной головке

### Full HD видеокамера ЭВК-003(81)R

Имеет встроенное устройство записи видеоизображения

EVK-003(81)R



все преимущества Full HD камеры  
отображение записываемого изображения на вспомогательном мониторе

встроенное устройство записи позволяет записывать видеоизображение на USB накопитель

управление записью кнопками на камерной головке и с пульта

8 800 700 87 03

бесплатный звонок по России

**eleps.ru**

# Светодиодные осветители

## Осветитель ксеноновый (300 Вт)

OK-300-01



высокий уровень освещенности  
операционного поля  
ресурс лампы не менее 500 часов

спектр излучения близкий к  
естественному солнечному  
спектру

## Светодиодный осветитель

CD-24-02



полноценный эквива-  
лент 200 Вт ксеноно-  
вого осветителя

долговечный источник  
света срок службы  
лампы не менее 30 000 ч

Защита от ослепления  
при отсоединении  
световодного кабеля


# Инсуффлятор электронный эндоскопический (40 литров)



## Инсуффлятор электронный эндоскопический

**40** литров

I-250-40AU

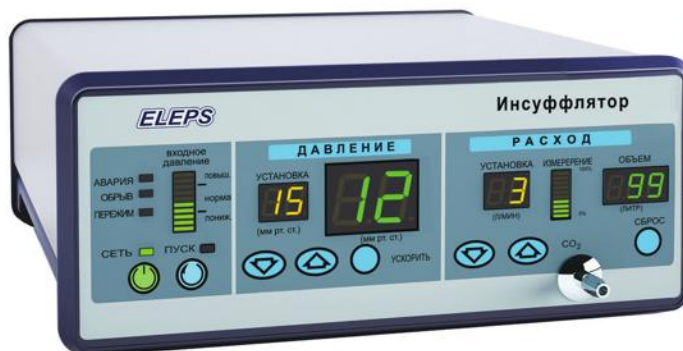

Встроенный  
речевой  
информатор

система форсированной  
поддачи газа до 40 л/мин.  
при непредвиденной поте-  
ре давления до дости-  
жения заданного уровня

двухцветный по типу «термо-  
метра» индикатор входного  
давления с изменением цвета  
при нарушении требуе-  
мого диапазона входного  
давления

индикация текущего  
расхода газа в процен-  
тах от установленного

## Аспиратор-ирригатор эндоскопический

АИЭ-15/15



способен работать с  
любым профильным  
инструментом

накопительная емкость  
снабжена системой  
аварийной сигнализации  
и отключения

быстрая смена  
источников  
физиологического  
раствора

**8 800 700 87 03**

бесплатный звонок по России

**eleps.ru**

# Аппараты электрохирургические высокочастотные

Стабилизация выходной мощности при изменении характеристик рассекаемой и коагулируемой ткани, а также при изменении напряжения питающей сети

Встроенная система автотеста контроля работы аппарата

Аппарат не создает помех на эндовидекамеру и телевизионный монитор

Датчики нейтрального электрода и низкочастотной утечки

Запоминание выбранных режимов и последних настроек мощности

Одновременная работа монополярного и биполярного инструмента

Управление педалью и с помощью держателя электродов с кнопочным управлением


Точный выбор мощности

## АЕ-200-02



| Вид воздействия | Режим работы            | Макс. мощность (Вт) |
|-----------------|-------------------------|---------------------|
| Резание         | Режим 1                 | 200                 |
|                 | Режим 2                 | 200                 |
|                 | Смешанное резание       | 200                 |
| Коагуляция      | Монополярная коагуляция | 100                 |
|                 | Спрей коагуляция        | 50                  |
|                 | Биполярная коагуляция   | 80                  |

Полноценное импортозамещение  
Уникальное соотношение цены и качества  
Сервис "Гарантия бесперебойной работы"

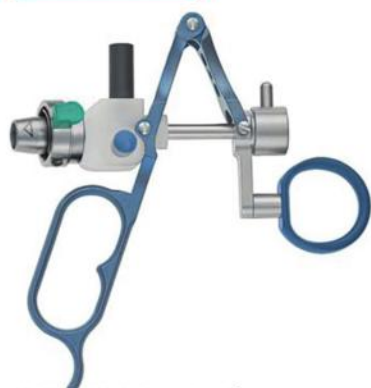

351-400-201 Элемент рабочий  
резектоскопа активный, с  
титановой рукояткой

351-400-200 Элемент рабочий  
резектоскопа пассивный, с  
титановой рукояткой



Работает в  
физрастворе

351-000-185 Тубус эндоскопический резектоскопа ротационный, 18,5 Charr.,  
состоящий из наружного и внутреннего тубусов, со скошенным керамическим  
кончиком, механизмом QuickLock, включая стандартный obturator



Электроды



351-400-401 Электрод-петля



351-400-403 Электрод-нож



351-400-405 Электрод-нож

Кабели биполярного  
резектоскопа



253-400-601



253-400-602



253-400-603



253-400-604



Аппаратный разъем:

Erbe

Martin, Aesculap, Berchtold

Valleylab, Lamidey, EMC

2-Banana

**8 800 700 87 03**  
бесплатный звонок по России  
**eleps.ru**

Полноценное импортозамещение

Уникальное соотношение цены и качества

Сервис "Гарантия бесперебойной работы"

## AE-300-02



| Вид воздействия        | Обозначение режима | Режим работы                            | Макс. мощность (Вт) |
|------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Монопольное резание    |                    | Низковольтное резание (Cut Low)         | 300                 |
|                        |                    | Чистое резание (Cut Pure)               | 300                 |
|                        |                    | Смешанное резание (Bland)               | 200                 |
| Монопольная коагуляция |                    | Контактная коагуляция (Low / Desiccate) | 120                 |
|                        |                    | Фульгурация (Medium / Fulgurate)        | 120                 |
|                        |                    | Спрей коагуляция (High / Spray)         | 120                 |
| Монопольная смесь      | 1                  | Резание — 75 %<br>Коагуляция — 25 %     | 220                 |
|                        | 2                  | Резание — 50 %<br>Коагуляция — 50 %     | 180                 |
|                        | 3                  | Резание — 25 %<br>Коагуляция — 75 %     | 140                 |
| Бипольная коагуляция   | 1                  | Макро режим (Macrobipolar)              | 90                  |
|                        | 2                  | Стандартный режим (Medium / Standart)   | 90                  |
|                        | 3                  | Прецизионный режим (Low / Precise)      | 90                  |

ООО "НПФ "ЭлеПС"  
Казань, Дементьева, 2В  
т. (843)203-58-38  
ф.(843)570-81-46  
info@eleps.ru

Полноценное импортозамещение

Уникальное соотношение цены и качества

Сервис "Гарантия бесперебойной работы"



AE- 200-04R

120 Вт



2,64 МГц (радиоволновой)



Использование радиочастоты **2,64** МГц облегчает, улучшает и ускоряет хирургические процедуры.

минимальные болевые ощущения или их полное отсутствие

отсутствие кровотечения и минимальное образование рубцов

гладкий быстро заживающий разрез с минимальным термическим поражением краев

исключает ожоги благодаря применению радиочастоты.

**8 800 700 87 03**

бесплатный звонок по России

**eleps.ru**

# Комплекс лазерной эндоурологии **Quasar**



## Оборудование

- **Urolaz Thu лазер** 
- **Видеокамера эндоскопическая ELEPS**  
(Full HD) арт. EVK-003(81)
- **Осветитель эндоскопический ELEPS**  
(светодиодный) арт. OSV-03
- **Кабель осветительный эндоскопический ELEPS** арт. КОЭ-30-240
- **Шейвер ротационный ELEPS**  
арт. UMD150.3
  - с рукояткой РО.3 (урологический морцеллятор)
  - вставка инструментальная UR1-042U
- **Аспиратор-ирригатор эндоскопический ELEPS** арт. AI-250-02

## Оптика и инструменты

- **Лазерный резектоскоп ELEPS**
- **Морцескоп ELEPS** (эндоскоп с инструментальным каналом 4,3мм и отклоненным окуляром, рабочая длина 260мм) с переходником



# UROLAZ

**Первый отечественный тулиевый лазер нового поколения для малоинвазивной хирургии и разрушения камней мочевыводящих путей и почек**



## 2в1

Уникальное сочетание длин волн позволяет с помощью одного комплекса проводить два вида операций:

- **ThuLEP – лазерная тулиевая энуклеация / вапоризация аденомы простаты**
- **Лазерная литотрипсия “в пыль”**

Уникальная длина волны 1,94 мкм - точно на пике спектра поглощения воды

Максимальная эффективность разрушения водонасыщенных тканей и литотрипсии камней мочевыводящих путей

Минимальная глубина проникновения лазерного излучения в биоткани (0,15мм)

Дополнительная длина волны 1,55 мкм для коагуляции сосудов

Зеленый пилотный лазер обеспечивает наилучшую видимость на фоне красных тканей при позиционировании лазерного пучка

Широкий выбор волоконного инструмента с минимальным диаметром волокна 150 мкм

Компактный, надежный дизайн и легкость транспортировки

Полностью воздушно охлаждаемый лазер, минимальный инженерный сервис

|                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Длина волны основного рабочего излучения, мкм       | 1,94 ± 0,04                           |
| Длина волны дополнительного рабочего излучения, мкм | 1,55 ± 0,01                           |
| Максимальная мощность для 1,94 мкм, Вт              | 120                                   |
| Максимальная мощность для 1,55 мкм, Вт              | 15                                    |
| Длина волны лазера целеуказателя, мкм               | 0,53                                  |
| Режимы работы основного излучения                   | непрерывный / импульсно-периодический |
| Длительность импульса излучения, мс                 | от 0,2 до 1000                        |
| Частота повторения импульса излучения, мс           | от 1 до 833                           |
| Максимальная энергия импульса для 1,94 мкм, ДЖ      | 8                                     |
| Диаметр световодной жилы сменного волокна, мкм      | 200, 400, 600, 1000                   |
| Габариты, мм                                        | 545 x 460 x 286                       |
| Масса, кг, не более                                 | 40                                    |

# Эндоскопическая видеокамера (Full HD ЭлеПС)



арт. EVK-003(81)V

*Full HD видеокамера ЭВК-003 "Элепс" с вариофокальным объективом обеспечивает чрезвычайно чистое и четкое изображение.*

разрешающая способность по горизонтали (HDMI) 900 ТВ-линий

4х кратный цифровой ZOOM и функция «СТОП-кадр»

улучшенная чувствительность и помехоустойчивость

автоматическая установка баланса белого

возможность центровки изображения на мониторе

камерная головка с переменным фокусным расстоянием от 18 до 33мм и 2-мя программируемыми кнопками

# Эндоскопический осветитель (светодиодный)



арт. OSV-03

*Светодиодный осветитель «ЭлеПС» по освещенности полноценная замена ксенонового источника света, превосходит его по надежности, долговечности и отличается выгодной ценой.*

сверхмощный светодиод с низким энергопотреблением; стабильный световой поток в течении всего срока эксплуатации (до 50 тыс. часов)

не создает излучения в УФ или ИК области — минимальный нагрев эндоскопа и снижение риска ожога ткани

защита от ослепления при отсоединенном световодном кабеле  
автоматическое регулирование освещенности по уровню видеосигнала

# Морцеллятор

(шейвер ротационный ШР-01-«ЭлеПС»)



арт. UMD150.3



Применяется для морцелляции (измельчения) и эвакуации тканей аденомы при операции лазерной энуклеации аденомы простаты.

эффективная морцелляция 7 гр/мин.

непрерывная эвакуация крови и тканей для ясности операционного поля

память на 9 настраиваемых режимов скорости работы инструмента

## Рукоятка (РО.3)

## Инструментальная ВСТАВКА (UR1-042U)



**от 100 до 1000  
возвратно-поступательных движений  
в минуту**




Длина вставки: 420 мм  
Диаметр: 4,2 мм

# Аспиратор-ирригатор эндоскопический

(АИЭ-15/15-ЭлеПС)

арт. AI-250-02

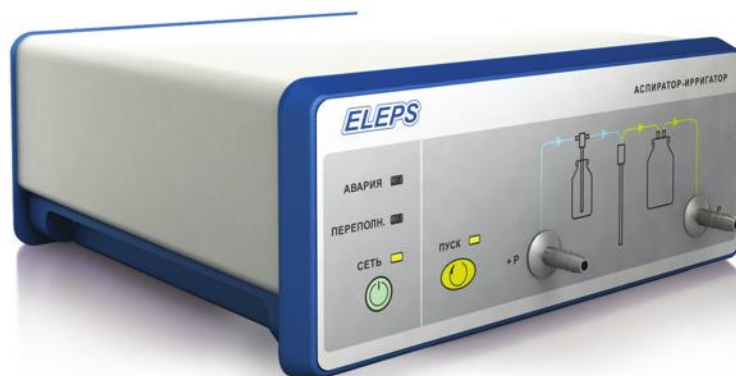

Аспиратор-ирригатор служит для орошения и отсоса жидкости в операционном поле.

высокая производительность

способен работать с любым профильным инструментом


синхронизация работы с шейвером ротационным (автоматическое управление отсосом при начале работы шейвера)

накопительная емкость снабжена системой аварийной сигнализации и отключения

быстрая смена источников физиологического раствора

## Морцескоп


Морцескоп — эндоскоп с инструментальным каналом 4,3мм и отклоненным окуляром.

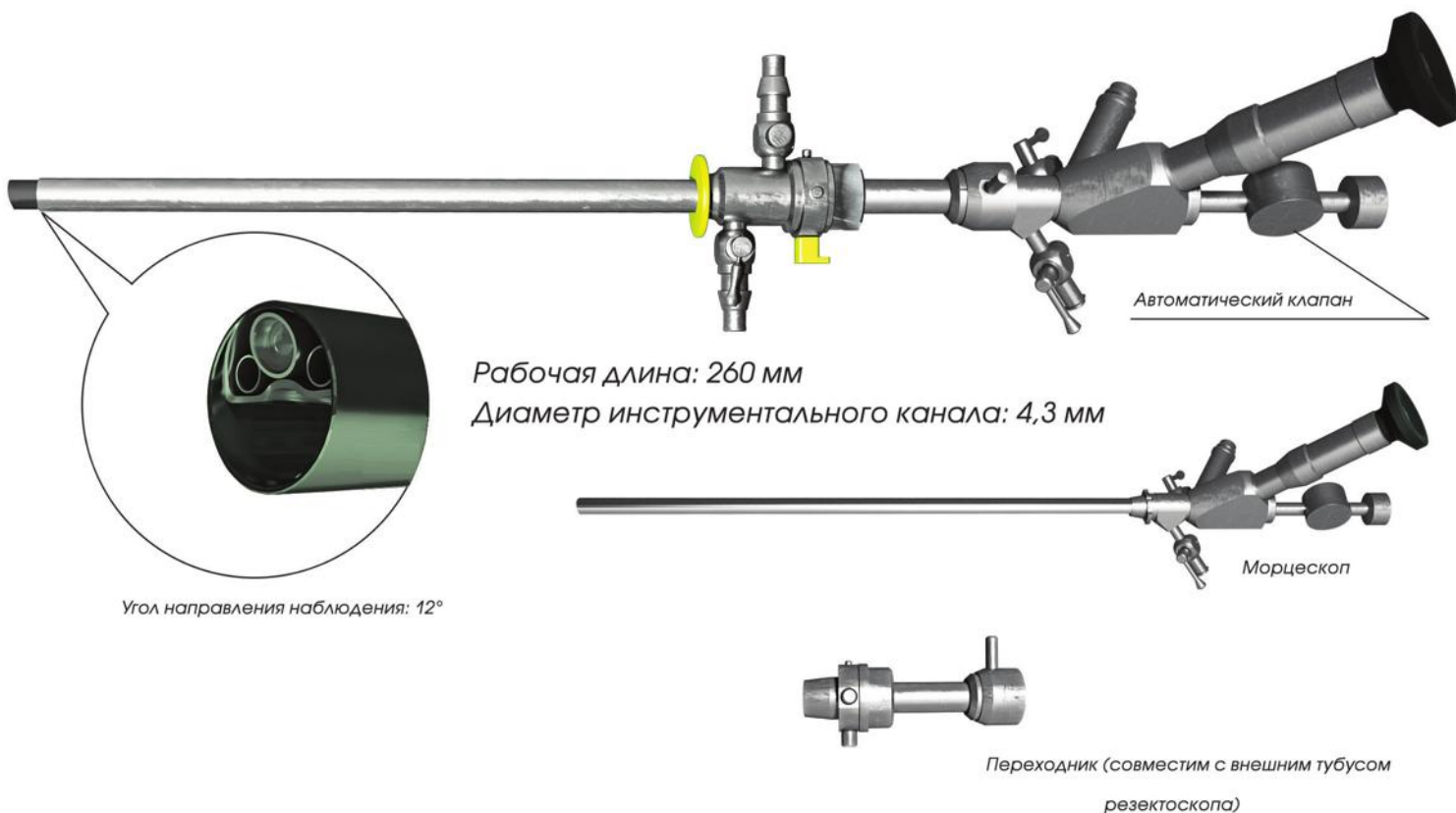

# Лазерный резектоскоп



Цистоскоп ЭлеПС,  $\varnothing$  4.0 мм, угол направления наблюдения — 12°, рабочая длина 301 мм

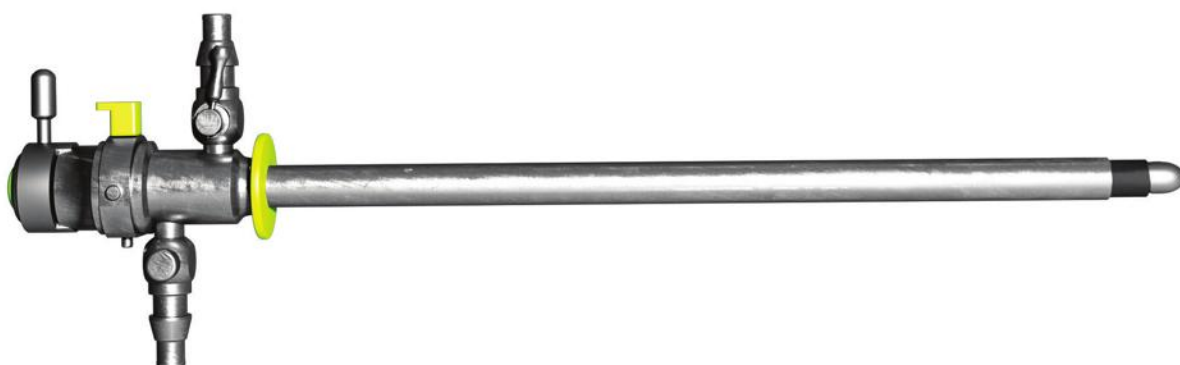

Тубус эндоскопический резектоскопа ротационный 24/26Charr, состоящий из наружного и внутреннего тубусов, со скошенным керамическим кончиком, механизмом QuickLock, включая стандартный obturator



Обтуратор эндоскопический визуальный, для тубусов резектоскопа 24/26Charr;



Элемент рабочий резектоскопа пассивный, с каналом для лазерного световода диаметром до 1,2 мм



Фиксатор по эндоскопии по Tuohy Borst, с коннектором Luer Lock, для лазерного волокна 0,6 - 1,4 мм

# Трансуретральный доступ




**253-000-200** Элемент рабочий пассивный



**253-000-201** Элемент рабочий активный

Кабели монополярные, 4,5м

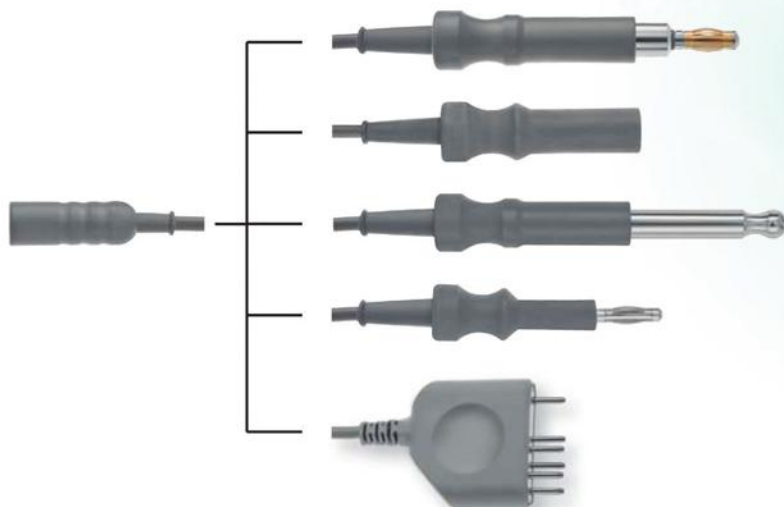

**253-610-001** Erbe 5мм

**253-610-002** Martin 4мм

**253-610-003** Valleylab 8мм

**253-610-004** "банан" 4мм

**700-501-453** SDS

|                                                                                     |                                | 24 шр       | 27 шр       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
|    | Электрод "петля угловая" 30°   | 253-300-201 | 253-300-301 |
|    | Электрод "петля угловая" 90°   | 253-300-222 |             |
|    | Электрод "петля прямая"        | 253-300-202 | 253-300-302 |
|    | Электрод "нож"                 | 253-300-203 | 253-300-303 |
|  | Электрод конический            | 253-300-204 | 253-300-304 |
|  | Электрод-шарик 3 мм            | 253-300-205 | 253-300-305 |
|  | Электрод-шарик 5 мм            | 253-300-206 | 253-300-306 |
|  | Электрод "ролик гладкий" 3 мм  | 253-300-207 | 253-300-307 |
|  | Электрод "ролик гладкий" 5 мм  | 253-300-208 | 253-300-308 |
|  | Электрод "ролик с шипами" 5 мм | 253-300-209 | 253-300-309 |
|  | Электрод "ролик с шипами" 3 мм | 253-300-210 | 253-300-310 |

|                                                                                     |                               | 24 шр       | 27 шр       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
|    | Электрод "ролик" 3 мм         | 253-300-211 | 253-300-311 |
|    | Электрод "ролик" 5 мм         | 253-300-212 | 253-300-312 |
|    | Электрод ленточный 1,2 мм     | 253-300-213 |             |
|    | Электрод ленточный 1,2 мм 90° | 253-300-214 |             |
|  | Электрод vaporизатор          | 253-300-215 |             |
|  | Кюретка острая (без В4)       | 253-300-218 |             |
|  | Кюретка тупая (без В4)        | 253-300-220 |             |
|  | Игла (без В4)                 | 253-300-219 |             |



Стерильные электроды ЕТО

Стерильные одноразовые электроды TUR, соответствующие системе RZ.  
24 шр



Электрод "ролик" 5 мм

253-000-211S



Электрод "ролик" 3 мм

253-000-212S



Электрод ленточный 1,2 мм

253-000-213S

24 шр

27 шр



Электрод "петля угловая" 30°

253-300-201S

253-300-301S



Электрод "нож"

253-300-203S

253-300-303S



Электрод-шарик, 3 мм

253-300-205S

253-300-305S



Электрод-шарик, 3 мм

253-300-206S

253-300-306S



Стерильные одноразовые электроды TUR, соответствующие системе OLYMPUS.



24 шр



Электрод "петля угловая" 30°

**253-300-801S**



Электрод "петля угловая"

**253-300-821S**



Электрод-нож

**253-300-803S**



Электрод-шарик, 3 мм

**253-300-805S**



Электрод-шарик, 5 мм

**253-300-806S**




Тубус резектоскопа 26 Charr с  
обтюратором, внутренним тубусом  
со скошенным концом, керамическим  
изолятором для использования  
со всеми рабочими элементами

**253-000-256**



Тубус резектоскопа 28 Charr с  
обтюратором, внутренним тубусом  
со скошенным концом, керамическим  
изолятором для использования  
со всеми рабочими элементами

**253-000-258**

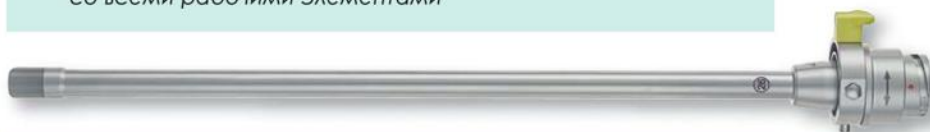

Внутренний тубус 24 Charr с  
керамическим изолятором,  
ротационный

**253-000-266**

Внутренний тубус 26 Charr с  
керамическим изолятором,  
ротационный

**253-000-268**



Тубус резектоскопа с центральным  
клапаном, 24 Ch со скошенным концом  
и обтюратором.

**253-000-724**



Тубус резектоскопа с центральным  
клапаном, 27 Ch со скошенным концом  
и обтюратором.

**253-000-727**



Тубус резектоскопа 26 Charri с обтюрато-  
ром, внутренним тубусом со скошенным  
концом, керамическим изолятором,  
с двумя вращающимися кранами и  
фиксатором Quicklock

**253-000-356**

Тубус резектоскопа 28 Charri с обтюрато-  
ром, внутренним тубусом со скошенным  
концом, керамическим изолятором,  
с двумя вращающимися кранами и  
фиксатором Quicklock

**253-000-358**



Внутренний тубус 24 Charri с  
керамическим изолятором ротаци-  
онный

**253-000-366**

Внутренний тубус 24 Charri с  
керамическим изолятором ротаци-  
онный

**253-000-368**



Тубус резектоскопа с краном, 24 Ch  
со скошенным концом и обтюратором

**253-000-524**



Тубус резектоскопа с краном, 27 Ch  
со скошенным концом и обтюратором

**253-000-527**



Тубус резектоскопа, 27 Ch, в сборе,  
приток на внутреннем, отток  
на внешнем тубусе

**253-000-558**



Обтуратор для резектоскопа,  
24/26 Шр.

**253-000-044**

Обтуратор для резектоскопа,  
27/28 Шр.

**253-000-047**



Отклоняющийся обтуратор  
для резектоскопа, 24/26 Шр.

**253-000-054**

Отклоняющийся обтуратор  
для резектоскопа, 27/28 Шр.

**253-000-057**



Визуальный обтуратор  
для резектоскопа, 24/26 Шр.  
и оптики 4 мм

**253-000-084**

Визуальный обтуратор  
для резектоскопа, 27/28 Шр.  
и оптики 4 мм

**253-000-087**



Визуальный обтуратор с инструмен-  
тальным каналом для резектоскопа,  
24/26 Шр. и оптики 4 мм

**253-000-094**

Визуальный обтуратор с инструмен-  
тальным каналом для резектоскопа,  
27/28 Шр. и оптики 4 мм

**253-000-097**





**253-400-500**

Надлобковый троакар, комплект



**253-400-501**

Тубус, 16 Шр.



**253-400-503**

Стилет пирамидальный



**253-400-504**

Стилет канюлированный



**253-400-505**

Канюля аспирационная



**253-400-506**

Канюля отсасывающая



**253-400-506**

Направляющая для троакара



**253-400-502**

Стабилизирующая пластина  
надлобкового троакара

ООО "НПФ "ЭлеПС"  
Казань, Дементьева, 2В  
т. (843)203-58-38  
ф.(843)570-81-46  
info@eleps.ru



Металлические Amplatz дилататоры 9, 12, 15, 18, 21, 24 Шр. 2 гибких, 2 жестких проводника

**253-900-155**



Металлический Amplatz дилататоры 27 Шр.

**253-900-156**



Металлический Amplatz дилататоры 30 Шр.

**253-900-157**



Пункцирующая 3-х составная канюля

**253-900-201**



Деляционная канюля

**253-900-202**



Проводник гибкий

**253-900-200**





Зажим 3-х зубый для больших камней, с пружинной рукояткой, 4 мм,  
рабочая длина 36 см

**253-900-306**



Зажим 3-х зубый, с окончатыми браншами, рабочая длина 36 см

**253-900-206**

Зажим 3-х зубый, с окончатыми браншами, рабочая длина 43 см

**253-900-246**



Зажим для извлечения камней, с пружинной рукояткой,  
рабочая длина 36 см

**253-900-205**

Зажим для извлечения камней, с пружинной рукояткой,  
рабочая длина 43 см

**253-900-245**



Двухбраншевый зажим для извлечения камней,  
с окончатыми браншами, с кольцевой рукояткой,  
рабочая длина 36 см

**253-900-210**

рабочая длина 43 см

**253-900-250**



Двухбраншевый зажим для извлечения камней,  
с браншами с грубой насечкой, с кольцевой рукояткой,  
рабочая длина 36 см  
рабочая длина 43 см

**253-900-212**

**253-900-252**



Зажим биопсийный, одно-  
браншевый, с кольцевой  
рукояткой, раб. длина 36 см  
рабочая длина 43 см

**253-900-211**

**253-900-251**



Ножницы однобраншевые,  
с кольцевой рукояткой,  
рабочая длина 36 см  
рабочая длина 43 см

**253-900-213**

**253-900-253**

Чрескожные расширители, одноразовые, стерильные

253-900-170



## Расширители

| Описание             | Длина (мм) | Шр |
|----------------------|------------|----|
| Расширитель 6 Шр     | 300        | 6  |
| Расширитель 8 Шр     | 300        | 8  |
| Расширитель 10 Шр    | 300        | 10 |
| Расширитель 12 Шр    | 300        | 12 |
| Расширитель 14 Шр    | 300        | 14 |
| Расширитель 16 Шр    | 300        | 16 |
| Расширитель 18 Шр    | 300        | 18 |
| Расширитель 20 Шр    | 300        | 20 |
| Расширитель 22 Шр    | 300        | 22 |
| Расширитель 24 Шр    | 300        | 24 |
| Расширитель 26 Шр    | 300        | 26 |
| Расширитель 28 Шр    | 300        | 28 |
| Расширитель 30 Шр    | 300        | 30 |
| Катетер для введения | 700        | 7  |



## Тубусы

| Шр (ID) | Шр (OD) | Длина (мм) |
|---------|---------|------------|
| 26      | 30      | 180        |
| 28      | 32      | 180        |
| 30      | 34      | 180        |

8 800 700 87 03

eleps.ru

# Уретерореноскопия



Эндоскоп жесткий - уретерореноскоп 45 см, со встроенным фибро-волоконным световодом и инструментальным каналом  
Эндоскоп жесткий - уретерореноскоп 31 см, со встроенным фибро-волоконным световодом и инструментальным каналом

**253-900-213**

**253-900-253**

- Уникальное оптическое качество (50 000 пикселей)
- Атравматический дизайн для легкого введения в отверстие мочеточника
- Система силиконовых клапанов для рабочих каналов
- Большой рабочий канал для всех аксессуаров до 5 Fr
- Наклонные каналы орошения / всасывания для лучшего расширения и непрерывное всасывание
- Наклонный световой разъем для эргономичной обработки

Дистальный наконечник 7.0 Fr  
Дистальный 8.0 Fr  
Проксимальный 9.5 Fr  
Общая рабочая длина  
45 см или 31 см  
Рабочий канал 5.8 Fr  
Поле зрения 65 °  
Направление обзора 5 °




**253-905-500**

Адаптер с  
силиконовым  
клапаном



**253-905-400**

Клапан  
силиконовый,  
5 шт/уп

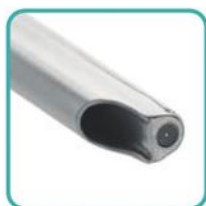

Направление обзора 5 °, поле зрения 65 °. Оптика позволяет получить очень подробное, яркое и четкое изображение до 50 000 рх. Благодаря атравматическому наконечнику легко вводится в отверстие мочеточника.



Инновационная полужесткая конструкция из цельного конического вала позволяет легко вставлять и аккуратно расширять



Новый окуляр установлен на «0» диоптрий и идеально соединяет оптику и дистальный наконечник.



Два инструментальных канала для полужесткого и гибкого инструмента



**600-662-077**

корзина для  
дезинфекции



**253-905-000**


контейнер для  
дезинфекции



**253-905-000**

контейнер для  
дезинфекции

ООО "НПФ "ЭлеПС"  
Казань, Дементьева, 2В  
т. (843)203-58-38  
ф.(843)570-81-46  
info@eleps.ru

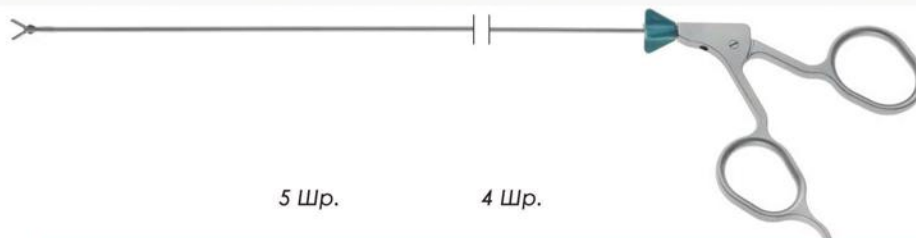

5 Шр.

4 Шр.



|         |                    |                    |                                                                 |
|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| жесткий | <b>253-950-005</b> | <b>253-950-004</b> | Щипцы для камней<br>2 подвижные бранши,<br>ретроградная насечка |
| гибкий  | <b>253-951-005</b> | <b>253-951-004</b> |                                                                 |



|         |                    |                    |                                                            |
|---------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| жесткий | <b>253-952-005</b> | <b>253-952-004</b> | Щипцы для больших<br>камней 2 подвижные<br>бранши, 1x1 зуб |
| гибкий  | <b>253-953-005</b> | <b>253-953-004</b> |                                                            |



|         |                    |                    |                                                           |
|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| жесткий | <b>253-954-005</b> | <b>253-954-004</b> | Щипцы для камней<br>2 подвижные бранши,<br>мелкая насечка |
| гибкий  | <b>253-955-005</b> | <b>253-955-004</b> |                                                           |



|         |                    |                    |                                        |
|---------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|
| жесткий | <b>253-956-005</b> | <b>253-956-004</b> | Щипцы биопсийные<br>2 подвижные бранши |
| гибкий  | <b>253-957-005</b> | <b>253-957-004</b> |                                        |



|         |                    |                    |                                      |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| жесткий | <b>253-958-005</b> | <b>253-958-004</b> | Ножницы прямые<br>1 подвижная бранша |
| гибкий  | <b>253-959-005</b> | <b>253-959-004</b> |                                      |



**253-960-025**

Корзина для извлечения  
камней, 2,5 Шр.,  
стерилизуемая одноразовая  
упаковка, 5 шт. в упаковке



**253-960-025**

Щетка цитологическая,  
3 Шр., одноразовая,  
5 шт. в упаковке




3-х зубчатый зажим для извлечения камней,  
гибкий, 5 Шр., длина 600 мм

**253-940-005**



Корзина Дормиа, металлическая, гибкая, 4 струны  
длина 600 мм, 5 Шр.

**253-940-005**

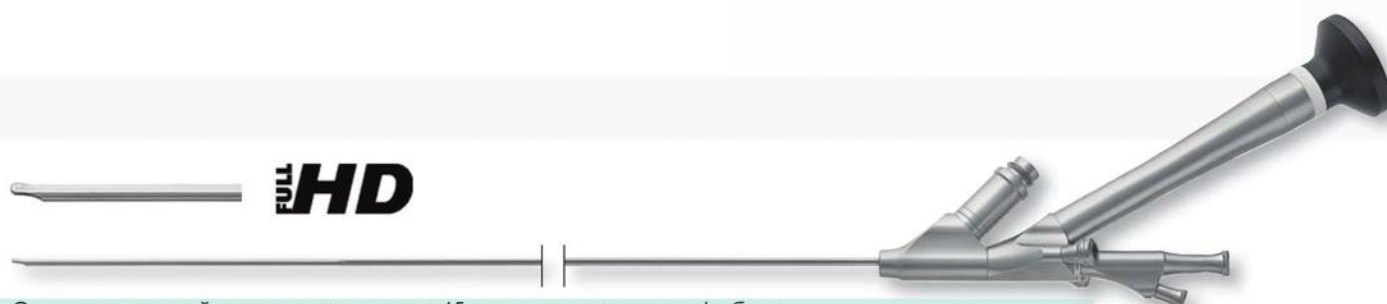

**HD**

Эндоскоп жесткий - уретерореноскоп 45 см, со встроенным фибро-волоконным световодом и инструментальным каналом

**253-910-540**

Эндоскоп жесткий - уретерореноскоп 31 см, со встроенным фибро-волоконным световодом и инструментальным каналом

**253-910-530**

- Уникальное оптическое качество (40 000 пикселей)
- Атравматический дизайн для легкого введения в отверстие мочеточника
- Система силиконовых клапанов для рабочих каналов
- Большой рабочий канал для всех принадлежностей до 4 Fr
- Наклонные каналы орошения / всасывания для лучшего расширения и непрерывное всасывание
- Наклонный световой разъем для эргономичной обработки

Дистальный наконечник 6.0 Fr  
Дистальный 7.0 Fr  
Проксимальный 7.5 Fr  
Общая рабочая длина 45 см  
или 31 см  
Рабочий канал 5 Fr  
Поле зрения 65 °  
Направление обзора 5 °



**253-905-500**

Адаптер с  
силиконовым  
клапаном



**253-905-400**

Клапан  
силиконовый,  
5 шт/уп

### Инструмент 3 Шр.



жесткий **253-950-003**

Щипцы для камней  
2 подвижные бранши,  
ретроградная насечка

гибкий **253-951-003**



жесткий **253-952-003**

Щипцы для больших  
камней 2 подвижные  
бранши, 1x1 зуб

гибкий **253-953-003**



жесткий **253-954-003**

Щипцы для камней  
2 подвижные бранши,  
мелкая насечка

гибкий **253-955-003**



жесткий **253-956-003**

Щипцы биопсийные  
2 подвижные бранши

гибкий **253-957-003**



жесткий **253-958-003**

Ножницы прямые  
1 подвижная бранша

гибкий **253-959-003**

## FULL HD

Эндоскоп жесткий - уретерореноскоп 45 см, со встроенным фиброволоконным световодом и инструментальным каналом

**253-915-540**

Эндоскоп жесткий - уретерореноскоп 31 см, со встроенным фиброволоконным световодом и инструментальным каналом

**253-915-530**

- Уникальное оптическое качество (30 000 пикселей)
- Атравматический дизайн для легкого введения в отверстие мочеоточника
- Система силиконовых клапанов для рабочих каналов
- Большой рабочий канал для всех принадлежностей до 4 Fr
- Наклонные каналы орошения / всасывания для лучшего расширения и непрерывное всасывание
- Наклонный световой разъем для эргономичной обработки

Дистальный наконечник 4.5 Fr

Дистальный 5.0 Fr

Проксимальный 6.0 Fr

Общая рабочая длина 45 см или 31 см

Рабочий канал 4 Fr

Поле зрения 65 °

Направление обзора 5 °



**253-905-500**

Адаптер с силиконовым клапаном



**253-905-400**

Клапан силиконовый, 5 шт/уп

### Инструмент 3 Шр.



жесткий

**253-950-003**

Щипцы для камней  
2 подвижные бранши,  
ретроградная насечка

гибкий

**253-951-003**



жесткий

**253-952-003**

Щипцы для больших  
камней 2 подвижные  
бранши, 1x1 зуб

гибкий

**253-953-003**



жесткий

**253-954-003**

Щипцы для камней  
2 подвижные бранши,  
мелкая насечка

гибкий

**253-955-003**



жесткий

**253-956-003**

Щипцы биопсийные  
2 подвижные бранши

гибкий

**253-957-003**



жесткий

**253-958-003**

Ножницы прямые  
1 подвижная бранша

гибкий

**253-959-003**

## Уретральный балонный катетер



- несовместимые
- короткий гибкий, рентгеноконтрастный наконечник
- прочный баллонный материал
- высокое номинальное давление разрыва
- Низкопрофильный
- быстрая дефляция
- новый гибкий вал катетера
- очистить внешний вал катетера
- гибкий баллон



| Артикул            | Ø баллона<br>(мм/Шр.) | длина<br>баллона<br>(мм) | Ø катетера<br>(мм/Шр.) | безопасное<br>давление<br>(атм) | Guide Wire<br>(дюймы) |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>254-904-040</b> | 4.0 / 12              | 40                       | 2.0 / 6.0              | 20                              | 0.035                 |
| <b>254-904-060</b> | 4.0 / 12              | 60                       | 2.0 / 6.0              | 20                              | 0.035                 |
| <b>254-904-100</b> | 4.0 / 12              | 100                      | 2.0 / 6.0              | 20                              | 0.035                 |
| <b>254-905-040</b> | 5.0 / 16              | 40                       | 2.0 / 6.0              | 20                              | 0.035                 |
| <b>254-905-060</b> | 5.0 / 16              | 60                       | 2.0 / 6.0              | 20                              | 0.035                 |
| <b>254-905-100</b> | 5.0 / 16              | 100                      | 2.0 / 6.0              | 20                              | 0.035                 |
| <b>254-906-040</b> | 6.0 / 18              | 40                       | 2.0 / 6.0              | 20                              | 0.035                 |
| <b>254-906-060</b> | 6.0 / 18              | 60                       | 2.0 / 6.0              | 20                              | 0.035                 |
| <b>254-906-100</b> | 6.0 / 18              | 100                      | 2.0 / 6.0              | 20                              | 0.035                 |
| <b>254-907-040</b> | 7.0 / 21              | 40                       | 2.0 / 6.0              | 20                              | 0.035                 |
| <b>254-907-060</b> | 7.0 / 21              | 60                       | 2.0 / 6.0              | 20                              | 0.035                 |
| <b>254-907-100</b> | 7.0 / 21              | 100                      | 2.0 / 6.0              | 20                              | 0.035                 |
| <b>254-908-040</b> | 8.0 / 24              | 40                       | 2.0 / 6.0              | 20                              | 0.035                 |
| <b>254-908-080</b> | 8.0 / 24              | 80                       | 2.0 / 6.0              | 20                              | 0.035                 |
| <b>254-907-040</b> | 10.0 / 30             | 40                       | 2.3 / 7.0              | 20                              | 0.035                 |
| <b>254-907-060</b> | 10.0 / 30             | 60                       | 2.3 / 7.0              | 20                              | 0.035                 |
| <b>254-907-080</b> | 10.0 / 30             | 80                       | 2.3 / 7.0              | 20                              | 0.035                 |

### Гидрофильный направляющий провод Нитинол

- Nitinol Core
- Экструдированное полиуретановое покрытие
- Гидрофильная поверхность
- Отличная видимость на рентгене



Гидрофильная направляющая проволока,  
одна сторона жесткая, одна сторона гибкая, длина 150 см

| Артикул            | Диаметр | Наконечник |
|--------------------|---------|------------|
| <b>253-832-150</b> | 0.032"  | прямой     |
| <b>253-832-151</b> | 0.032"  | изогнутый  |
| <b>253-835-150</b> | 0.035"  | прямой     |
| <b>253-835-150</b> | 0.035"  | изогнутый  |

# ЭНДОДЕЗ



Современное стерилизующее и дезинфицирующее средство для эндоскопов, эндоскопических инструментов и оборудования

В связи с частыми ошибками при обработке оптических трубок для эндоскопических манипуляций, приводящими к выходу их из строя, а также вопросами, связанными с обработкой оптики, нами разработано специальное средство для стерилизации и дезинфекции оптических трубок, инструментов и оборудования для эндоскопии.

Средство имеет хорошие моющие и дезодорирующие свойства, не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов. Средство сохраняет свои свойства после заморозания и дальнейшего оттаивания. Рабочие растворы негорючи, пожаро- и взрывобезопасны.

## Режим дезинфекции ручным способом

| Виды изделий               | Режим обработки                                 |                  | Способ обработки |
|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                            | Концентрация рабочего раствора по препарату (%) | Экспозиция (мин) |                  |
| Эндоскопы жесткие и гибкие | 0,25                                            | 60               | Погружение       |
|                            | 0,5                                             | 30               |                  |
|                            | 1,0                                             | 15               |                  |
| Инструменты для эндоскопов | 0,25                                            | 45               |                  |
|                            | 0,5                                             | 20               |                  |
|                            | 1,0                                             | 10               |                  |

## Режим дезинфекции, совмещенный с предстерилизационной очисткой жестких и гибких эндоскопов

| Этапы обработки изделий                                | Режим обработки                                 |                      |                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|                                                        | Концентрация рабочего раствора по препарату (%) | Температура раствора | Экспозиция (мин) |
| Замачивание при полном погружении и заполнении каналов | 0,25<br>0,5<br>1,0                              | Не ниже +18° С       | 60<br>30<br>15   |
| Мойка изделий с мойкой и чистой водой                  | В растворе где производилось замачивание        | Не ниже +18° С       | 2-3              |
| Ополаскивание проточной питьевой водой                 | Не нормировано                                  | Не нормировано       | 5                |
| Ополаскивание проточной дистиллированной водой         | Не нормировано                                  | Не нормировано       | 1                |

## Режим ДВУ и стерилизации жестких и гибких эндоскопов

| Виды обработки изделий            | Режим обработки                                 |                      |                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|                                   | Концентрация рабочего раствора по препарату (%) | Температура раствора | Экспозиция (мин) |
| Дезинфекция высокого уровня (ДВУ) | 3,0                                             | Не ниже +18°С        | 30               |
|                                   | 4,0                                             |                      | 15               |
|                                   | 6,0                                             |                      | 5                |
| Стерилизация эндоскопа            | 3,0                                             | Не ниже +18°С        | 60               |
|                                   | 4,0                                             |                      | 30               |
|                                   | 6,0                                             |                      | 15               |
|                                   | 8,0                                             |                      | 5                |

\* Полные рекомендации по применению средства "ЭНДОДЕЗ" содержатся в инструкции по применению для персонала ЛПУ и пр. учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.



ООО "НПФ "ЭлеПС"  
Казань, Дементьева, 2В  
т. (843)203-58-38  
ф. (843)570-81-46  
info@eleps.ru

8 800 700 87 03  
бесплатный звонок по России  
eleps.ru